



ResMed

AirFit™ F20

Full face mask



User guide







English | Svenska

Suomi | Dansk



Norsk | Eesti

Русский



Fitting / Tillpassning / Sovittaminen / Tilpassing /
Tilpasning / Paigaldamine / Установка маски

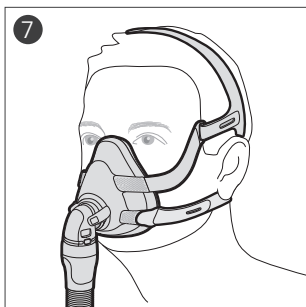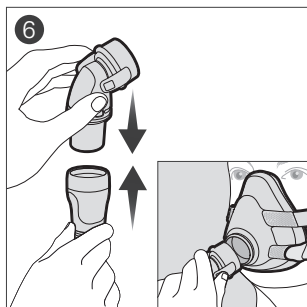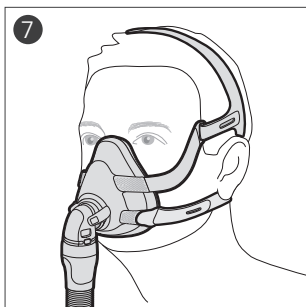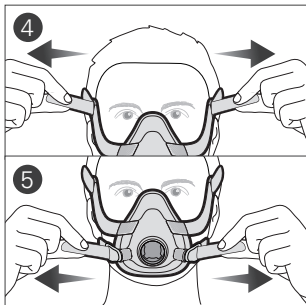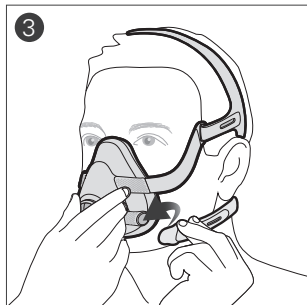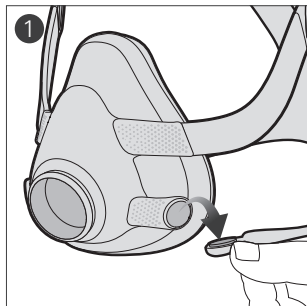





Adjustment / Justering / Säätäminen / Justering /
Justering / Kohendamine / Регулировка

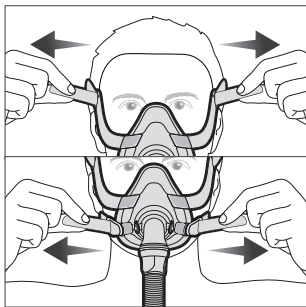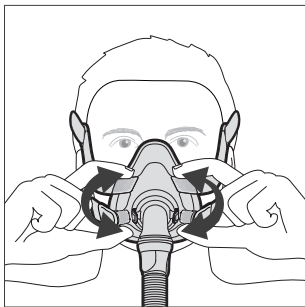




Removal / Borttagning / Pois ottaminen / Fjernelse /
Fjerning / Eemaldamine / Снятие маски

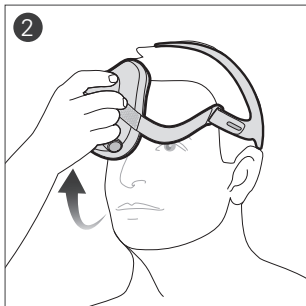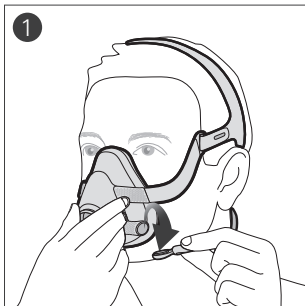



Disassembly / Demontering / Purkaminen / Adskillelse /
Demontering / Osadeks lahtivõtmine / Разборка

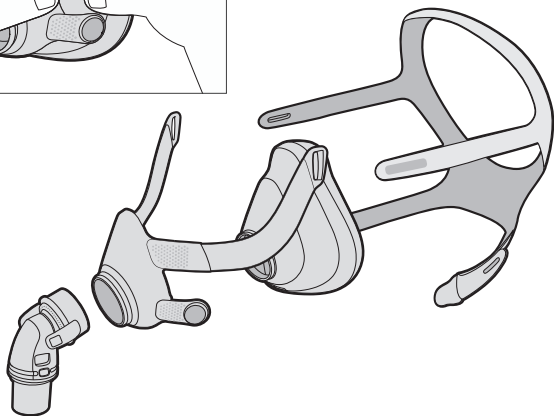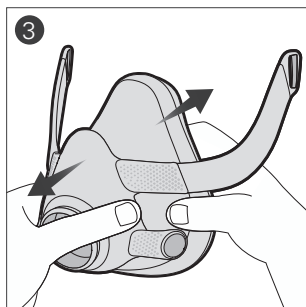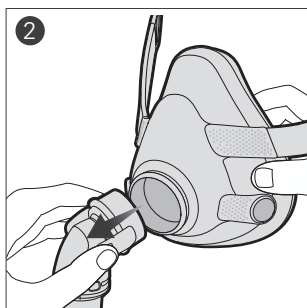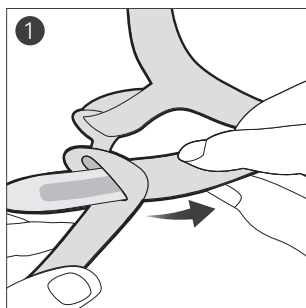

Reassembly / Montering / Kokoaminen / Samling /
Montering / Uuesti kokkurane / Повторная сборка

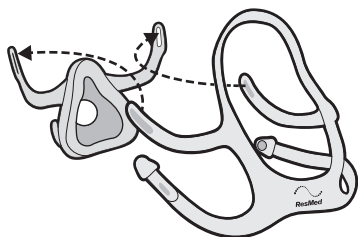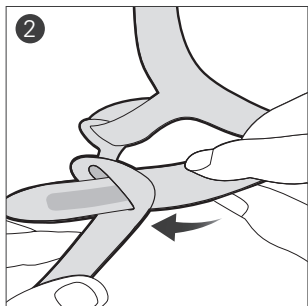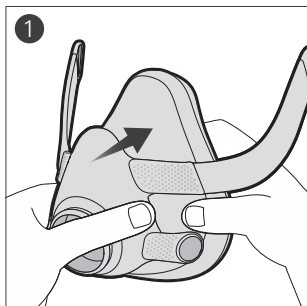

Cleaning the vent /Tillpassning / Ilma-aukon
puhdistaminen / Rengøring af lufthullet / Rengjøre
ventileringsåpningen / Öhuava puhastamine /
Очистка вентиляционного отверстия

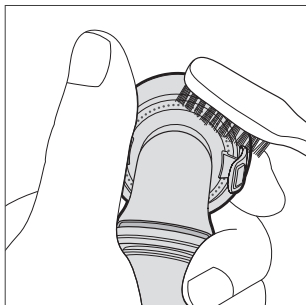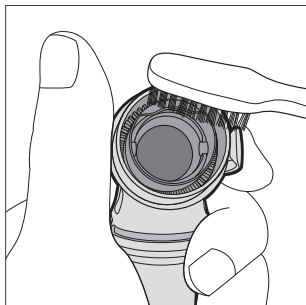

AirFit™ F20

Kokokasvomaski

Kiitos, kun olet valinnut käyttöösi AirFit F20 -maskin. Tässä on käyttöohjeet AirFit F20 - ja AirFit F20 for Her -maskeille, joista käytetään tässä käyttöohjeessa yhteisnimitystä AirFit F20.

Tämän käyttöohjeen käyttö

Lue koko käyttöohje ennen kuin alat käyttää maskia. Katso ohjeita lukiessasi käyttöohjeen alussa olevia kuvia.

Käyttötarkoitus

AirFit F20 on noninvasiivinen lisävaruste, joka ohjaa ilmavirtauksen (tai ilmavirtauksen ja lisähapen) potilaalle paineistettua ilmaa (PAP) puhaltavalta laitteelta, kuten jatkuvaa ylipainehoitoa (CPAP) antavalta laitteelta tai kaksoispainelaitteelta.

AirFit F20 on tarkoitettu:

- yli 30 kg painavien potilaiden käyttöön, joille on määrätty ylipainehoitoa
- tarkoitettu saman potilaan toistuvaan käyttöön kotioloissa ja useamman potilaan toistuvaan käyttöön sairaalassa/hoitolaitoksessa.

VAROITUS

AirFit F20 -maskin pääremmien alahihnoissa ja rungossa käytetään magneetteja. Varmista, että pääremmit ja runko pysyvät vähintään 50 mm:n etäisyydellä aktiivisista implanteista (esim. sydämen-tahdistin tai defibrillaattori) paikallisten magneettikenttien vaikutusten välttämiseksi. Magneettikentän voimakkuus on alle 400 mT.

Vasta-aiheet

Magneettisia osia sisältävien maskien käyttö on vasta-aiheista potilailla, joilla on ennestään jokin seuraavista sairauksista:

- aneurysman korjaamiseen tarkoitettu pään sisään implantoitu metallinen hemostaattinen klipsi
- toiseen tai molempiin silmiin on tunkeutunut metallisiruja silmävamman seurauksena.

YLEISET VAROITUKSET

- Maskia on käytettävä pätevässä valvonnassa, jos käyttäjä ei pysty itse ottamaan maskia pois kasvoiltaan. Maski ei ehkä sovi sellaisten potilaiden käyttöön, joilla on aspiraation riski.
- Mikäli ei toisin mainita, maskissa on käytettävä sen mukana toimitettua kulmakappaletta (jossa on venttiili- ja ilma-aukkorakenne), jotta voidaan varmistaa, että maski toimii turvallisesti ja oikealla tavalla. Älä käytä maskia, jos venttiili tai ilma-aukkorakenne on rikki tai puuttuu.
- Maskin kulmakappaleella, venttiilillä ja ilma-aukkorakenteella on erityisiä turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Maskia ei saa käyttää, jos venttiili on rikkoutunut, koska silloin turvatoiminto ei toimi. Kulmakappale on vaihdettava, jos venttiili on rikkoutunut, vääntynyt tai revennyt. Ilma-aukot ja venttiili tulee pitää avoimina.
- Maskia tulee käyttää vain yhdessä lääkärin tai hoitohenkilökunnan suosittelemien CPAP- tai kaksoispainelaitteiden kanssa.
- Vältä liittämästä taipuisasta PVC-muovista valmistettuja osia (esim. PVC-letku) suoraan maskin mihinkään osaan. Taipuisa PVC-muovi sisältää aineosia, jotka voivat olla haitallisia maskin materiaaleille ja voivat saada aikaan osien rikkoutumista tai murtumista.
- Maskia saa käyttää vain, kun laite on päällä. Kun maski on laitettu kasvoille, on varmistettava, että laite puhaltaa ilmaa. Selitys: CPAP- ja kaksoispainelaitteiden kanssa on tarkoitus käyttää erikoismaskeja (tai -liittimiä), joissa olevien ilma-aukkojen kautta ilma pääsee virtaamaan jatkuvasti ulos maskista. Kun laite on päällä ja toimii kunnolla, laitteesta tuleva uusi ilma saa uloshengitetyn ilman virtaamaan pois maskin ilma-aukkojen kautta. Kun laite ei ole päällä, maskissa oleva venttiili avautuu ilmakehään, jolloin maskin käyttäjä voi hengittää raitista ilmaa. Maskin käyttäjä voi kuitenkin joutua hengittämään enemmän uloshengitysilmää, kun laite ei ole päällä. Tämä koskee useimpia CPAP- ja kaksoispainelaitteiden kanssa käytettäväksi tarkoitettuja kokokasvomaskeja.
- Noudata kaikkia varotoimia, kun käytät lisähapetta.
- Hapen virtaus on laitettava pois päältä, kun CPAP- tai kaksoispainelaite ei ole käynnissä, jotta virtaavaa happea ei pääsisi kertymään laitteen kotelon sisään eikä aiheutuisi tulipalon vaaraa.

- Happi edesauttaa palamista. Hapetta ei saa käyttää tupakoitaessa tai avotulen läheisyydessä. Käytä lisähapetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Kiinteällä lisähapen virtausnopeudella sisäänhengitysilman happipitoisuus vaihtelee paineasetuksista, potilaan hengitystavasta, valitusta maskista, happiliitännäkohdasta ja ilmavuodon määrästä riippuen. Tämä varoitus pätee useimpiin CPAP- tai kaksoispainelaitteisiin.
- Maskin tekniset tiedot ovat lääkäriä varten, jotta hän voi tarkistaa, että ne ovat yhteensopivat käytettävän CPAP- tai kaksoispainelaitteen kanssa. Jos maskia käytetään ohjeista poikkeavalla tavalla tai muiden kuin yhteensopivien laitteiden kanssa, maskin tiiviyys ja mukavuus voivat kärsiä, hoito ei ole parasta mahdollista ja ilmavuoto tai sen määrän vaihtelut voivat vaikuttaa CPAP- tai kaksoispainelaitteen toimintaan.
- Lopeta tämän maskin käyttö, jos sen käyttämisestä aiheutuu MIKÄ TAHANSA haitallinen reaktio, ja ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin tai hoitohenkilökuntaan.
- Maskin käytöstä voi aiheutua kipua hampaisiin, ikeniin tai leukaan tai se voi pahentaa hampaistossa jo ilmeneviä ongelmia. Mikäli oireita esiintyy, kysy neuvoa lääkäriltä tai hammaslääkäriltä.
- CPAP-kokokasvomaskien F20-sarjan maskeja ei ole tarkoitettu käytettäväksi samanaikaisesti sumutinlääkityksen kanssa, joka on liitetty maskin/letkun ilmankiertoon.
- Tätä maskia, kuten kaikkia maskeja käytettäessä voidaan joutua hengittämään jonkin verran uloshengitysilmaa alhaisilla CPAP-paineilla.
- Katso asetuksia ja käyttöä koskevat tiedot CPAP- tai kaksoispainelaitteen käyttöohjeesta.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ennen kuin alat käyttää maskia.

Maskin käyttö

Kun käytät maskia ResMedin CPAP- tai kaksoispainelaitteen kanssa, jossa on maskinvalintatoiminto, katso oikea asetus tämän käyttöohjeen Tekniset tiedot -kohdasta.

Täydellisen luettelon tämän maskin kanssa yhteensopivista laitteista näet Maskien/laitteiden vastaavuus -kohdasta osoitteesta www.resmed.com/downloads/masks. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteys paikalliseen ResMed-edustajaan.

Käytä vakiokartioliitintä, jos halutaan nähdä painelukemat ja/tai käyttää lisähappea.

Sovittaminen

1. Purista ja vedä kumpaakin magneettikiinnikettä rungosta pois päin.
2. Varmista, että pääremmien ResMed-logo on ulospäin ja oikeinpäin. Katso, että pääremmien molemmat alahihnat ovat auki. Pidä maskia kasvojesi vasten ja vedä pääremmit pään yli.
3. Vedä pääremmien alemmat hihnat korviesi alapuolelta ja kiinnitä magneettikiinnike maskin runkoon.
4. Avaa pääremmien ylähihnojen tarrakiinnikkeet. Vedä hihnoja tasaisesti, kunnes maski pysyy paikallaan ja kuvan mukaisesti. Kiinnitä tarrakiinnikkeet takaisin.
5. Avaa pääremmien alahihnojen tarrakiinnikkeet. Vedä hihnoja tasaisesti, kunnes maski pysyy paikallaan ja tukeutuu mukavasti leukaan. Kiinnitä tarrakiinnikkeet takaisin.
6. Liitä laitteen ilmaletku kulmakappaleeseen. Kiinnitä kulmakappale maskiin painamalla sivupainikkeita ja työntämällä kulmakappale maskiin, varmistaen että se napsahtaa sisään kummallakin puolella.
7. Maskin ja pääremmien pitäisi nyt olla kuvan mukaisesti.

Säätäminen

Säädä tarvittaessa hieman maskia mukavimman asennon saavuttamiseksi. Varmista, että pehmike ei jää ryppyyn ja että pääremmit eivät ole kierteellä.

1. Käynnistä laite niin, että se puhalttaa ilmaa.

Säätövinkkejä:

- ✓ Vedä maskia paineistettuna pois kasvoista, jolloin pehmuste pystyy täyttymään ilmalla. Aseta sitten uudelleen kasvoille.
- ✓ Korjaa mahdolliset vuodot maskin yläosassa säätämällä pääremmien ylähihnoja. Säädä pääremmien alahihnoja alaosan vuodon korjaamiseksi.
- ✓ Säädä vain sen verran, että mukavan ja tiivis istuvuus saavutetaan. Älä kiristä liikaa, koska se voi tuntua epämukavalta.

Pois ottaminen

1. Purista ja vedä kumpaakin magneettikiinnikettä rungosta pois päin.
2. Vedä maski pois kasvoiltasi ja takaa pääsi yli.

Maskin purkaminen

Jos maski on liitetty laitteeseen, irrota laitteesta tuleva ilmaletku kulmakappaleesta.

1. Avaa pääremmien ylähihnojen tarrakiinnikkeet. Vedä hihnat irti maskin rungosta.
Vihje: Pidä magneettikiinnikkeet kiinnitettynä pääremmien alempiin hihnoin, jotta sinun on helppo erottaa toisistaan ylemmät ja alemmat hihnat, kun kokoat maskin.
2. Irrota kulmakappale maskista painamalla kulmakappaleen sivuilla olevia painikkeita ja vetämällä kulmakappale irti.
3. Pidä rungon reunasta kiinni ylemmän ja alemman sivukappaleen välistä. Vedä pehmike varovasti irti rungosta.

Maskin kokoaminen

1. Kiinnitä pehmuste runkoon kohdistamalla pyöreät aukot ja työntämällä yhteen kunnes ne pysyvät yhdessä.
2. Katso, että ResMed-logo on ulospäin ja pystyssä. Pujota sitten pääremmien ylähihnat sisäpuolelta rungossa oleviin koloihin. Kiinnitä hihnat taittamalla ne kiinni.

Maskin puhdistaminen kotikäytössä

Pese maski ja pääremmit käsin hieroen niitä varovasti haaleassa (noin 30 °C) vedessä, jossa on mietoa nestemäistä pesuainetta. Huuhdo kaikki osat hyvin juoksevalla vedellä ja anna niiden kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.

VAROITUS

- Hyvään hygieniakäytäntöön kuuluu aina puhdistusohjeiden noudattaminen ja miedon nestemäisen puhdistusaineen käyttö. Jotkut puhdistustuotteet voivat vaurioittaa maskia, sen osia ja niiden toimintaa, tai sellaisista voi jäädä jäljelle haitallisia höyryjä, jotka voivat joutua hengitysilmaan, jos osia ei huuhdota kunnolla.
- Ylläpidä maskin laatua ja estä terveyttäsi uhkaavien mikrobien kertyminen puhdistamalla maski ja sen osat säännöllisesti.

HUOMIO

Maskin silmämääräisen tarkistuksen kriteerit: Jos maskin osissa näkyy selviä vaurioita (halkeamia, värin muuttumista, repeytymiä tms.), rikkiäinen osa on poistettava käytöstä ja korvattava uudella.

Päivittäin/jokaisen käyttökerran jälkeen:

1. Pura maski osiin purkamisohjeiden mukaisesti.
2. Huuhto maskin runko, kulmakappale ja pehmike juoksevalla vedellä. Puhdista pehmeällä harjalla, kunnes kaikki lika on poissa.
3. Liota osia enintään 10 minuuttia lämpimässä vedessä, jossa on mietoa nestemäistä pesuainetta.
4. Ravistele osia vedessä.
5. Pese harjalla kulmakappaleen liikkuvat osat ja ilma-aukkojen ympäristö.
6. Pese harjalla rungon ne kohdat, joihin sivukappaleet kiinnittyvät sekä rungon sisäpuoli ja ulkopuoli kohdassa, johon kulmakappale kiinnittyy.
7. Huuhtele osat juoksevalla vedellä.
8. Anna maskin osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina. Puristele rungon sivukappaleita varmistaaksesi, että saat ylimääräisen veden pois.

Kerran viikossa:

1. Pura maski osiin. Magneetit saavat jäädä paikoilleen pääremmeihin puhdistuksen ajaksi.
2. Pese pääremmit käsin lämpimässä vedessä, jossa on mietoa nestemäistä pesuainetta.
3. Huuhtele pääremmit juoksevalla vedellä. Tarkista pääremmit ja varmista, että ne ovat puhtaat ja ettei niissä ole pesuainejäämiä. Pese ja huuhto tarvittaessa uudestaan.
4. Purista pääremmeistä pois ylimääräinen vesi.
5. Anna pääremmien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.

Maskin käsittely toista potilasta varten

Desinfioi tämä maski ennen kuin se annetaan seuraavan potilaan käyttöön. Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeita on saatavissa osoitteessa www.resmed.com/downloads/masks. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteys paikalliseen ResMed-edustajaan.

Vianmääritys

Engelma/mahdollinen syy

Toimenpide

Maski tuntuu epämukavalta.

Pääremmien hihnat ovat liian kireällä.

Pehmikkeen kalvo on suunniteltu täyttymään ilmalla kasvoja vasten ja tuntumaan mukavan tiiviiltä, kun pääremmejä on kiristetty hieman. Säädä hihnojen kireys tasaisesti. Varmista, etteivät pääremmien hihnat ole liian tiukat ja ettei pehmike ole rypyssä.

Maski voi olla väärän kokoinen.

Puhu asiasta lääkärillesi, jotta hän voi tarkistaa kasvojesi koon AirFit F20 -sovitusmallia käyttäen. Huomaa, etteivät eri maskien koot vastaa aina toisiaan.

Maskista lähtee liikaa melua.

Kulmakappale on asennettu väärin tai koko maski on koottu väärin.

Irrota kulmakappale maskista ja laita se takaisin paikalleen ohjeiden mukaan. Tarkista, että maski on koottu ohjeiden mukaisesti oikein.

Ilma-aukko on likainen.

Puhdista ilma-aukot pehmeällä harjalla.

Maskista vuotaa ilmaa kasvojen ympäriltä.

Pehmikkeen kalvo on rypyssä. Maski on laitettu kasvoille väärin tai se on säädetty väärin.

Sovita maski uudelleen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että pehmike tulee kasvoille oikeaan kohtaan ennen kuin vedät pääremmit pään yli. Älä vedä maskia kasvoja pitkin alas, kun säädät maskia sopivaksi, koska pehmike voi silloin taittua.


Maski voi olla väärän kokoinen.

Puhu asiasta lääkärillesi, jotta hän voi tarkistaa kasvojesi koon sovitusmallia käyttäen. Huomaa, etteivät eri maskien koot vastaa aina toisiaan.

Tekniset tiedot

Paine/ilmavirtauskäyrä

Maskissa on passiivinen tuuletus (ilma-aukko) estämässä uloshengitysilman uudelleenhengittämistä. Ilma-aukon virtausarvot voivat vaihdella valmistuspoikkeamien johdosta.

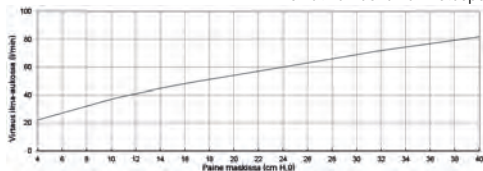

Paine (cm H ₂ O)	Virtaus (l/min)
4	22
8	32
10	37
12	41
16	48
20	54
24	60
28	66
30	69
32	72
36	77
40	82

Kuollutta tilaa koskevat tiedot

Maskin kuollut tila on fyysisesti tyhjä tila pyörivän liittimen päähän saakka. Suuria pehmikeitä käytettäessä kuollut tila on 240 ml.

Hoitopaine

4–40 cm H₂O

Virtausvastus, kun antiasfyksiaventtiili (AAV) on suljettuna ilmakehästä

Mitattu paineenlasku (nimellinen)
virtausnopeudella 50 l/min: 0,2 cm H₂O
virtausnopeudella 100 l/min: 0,8 cm H₂O

Sisään- ja uloshengityksen virtausvastus, kun antiasfyksiaventtiili (AAV) on avattuna ilmakehään

Sisäänhengitys 0,5 cm H₂O
virtausnopeudella 50 l/min:
Uloshengitys 0,6 cm H₂O
virtausnopeudella 50 l/min:

Paine, kun antiasfyksiaventtiili (AAV) on avattuna ilmakehään

≤ 4 cm H₂O

Paine, kun antiasfyksiaventtiili (AAV) on suljettuna ilmakehästä	≤ 4 cm H ₂ O
Ympäristöolosuhteet	Käyttölämpötila: 5–40 °C Käyttökosteus: 15–95 %, ei kondensoituva Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20– +60 °C Ilmankosteus säilytyksen ja kuljetuksen aikana: enintään 95 %, ei kondensoituva
Ääni	ILMOITETUT KAHDEN ARVON MELUPÄÄSTÖARVOT ISO 4871 -standardin mukaisesti. Maskin A-painotettu äänentehotaso on 31 dBA (epävarmuudella 3 dBA). Maskin A-painotettu äänenpainetaso 1 metrin etäisyydellä on 23 dBA (epävarmuudella 3 dBA).
Ulkomitat	Maski täysin koottuna kulmakappaleineen (ei pääremmejä) 154 mm (K) x 159 mm (L) x 147 mm (S)
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)	Tässä maskissa käytetyt magneetit ovat yleisessä käytössä ionisoimatonta säteilyä koskevien ICNIRP-määritysten rajoissa.
Käyttöikä	AirFit F20 -maskin käyttöikä riippuu käytön määrästä, maskin kunnossapidosta ja ympäristöstä, jossa maskia käytetään tai säilytetään. Maski ja sen osat koostuvat moduuleista ja siksi on suositeltavaa, että käyttäjä huoltaa maskia ja tarkastaa sen säännöllisesti sekä vaihtaa maskin tai sen osia tarvittaessa tai tämän käyttöohjeen kohdassa 'Maskin puhdistaminen kotikäytössä' olevien 'tuotteen tarkastamista koskevien visuaalisten kriteerien' mukaisesti. Maskin varaosien tilaamista koskevat ohjeet käyvät ilmi tämän käyttöohjeen 'Maskin osat' -kohdasta.
Maskin asetusvaihtoehdot	AirSense, AirCurve tai S9: Valitse "Full Face" (kokokasvo). Muille laitteille: Valitse maskivaihtoehdoksi "MIR FULL" (jos käytettävissä) tai muussa tapauksessa "FULL FACE" (kokokasvo).



Device Setting

Full Face

Huomautuksia:

- Tämän tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty PVC-muovia tai ftalaatteja, kuten DEHP, DBP tai BBP.
- Tämän tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumia (lateksia).
- Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Säilytys

Varmista, että maski on täysin puhdas ja kuiva ennen kuin pistät sen säilytykseen pidemmäksi aikaa. Säilytä maskia kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta.

Hävittäminen

Tämä maski ei sisällä mitään vaarallisia valmistusaineita ja se voidaan hävittää tavallisen talousjätteen tapaan.

Symbolit

Tuotteessa tai sen pakkauksessa voi esiintyä seuraavia symboleja:



Tuotenumero



Eränumero



Ilmankosteusrajoitus



Lämpötilarajoitus



Helposti särkyvää, käsiteltävä varoen



Tuotetta ei ole valmistettu luonnonkumista (lateksista)



Valmistaja



Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella



Suojattava sateelta



Tämä puoli ylöspäin



Kokokasvomaski



Laitteasetus - Kokokasvo



Koko - S (pieni)



Koko - M (keskikokoinen)



Koko - L (suuri)



Ilmaisee varoitusta tai huomioitavaa seikkaa ja varoittaa vammautumisen mahdollisuudesta tai ilmaisee erityistoimenpiteet laitteen turvallista ja tehokasta käyttöä varten



Huomio, perehdy mukana tulleisiin ohjeisiin

Kuluttajatakuu

ResMed ilmoittaa noudattavansa kaikkia Euroopan unionin alueella myytäviä tuotteita koskevia EU-direktiivin 1999/44/EY nojalla tunnustettuja kuluttajasuojaa koskevia oikeuksia ja Euroopan unionin jäsenmaiden vastaavia kansallisia lakeja.

Mask Components / Maskkomponenter / Maskin osat
 / Maskedele / Maskens komponenter / Maski osad /
 Компоненты маски

		AirFit F20	AirFit F20 for Her
A	Elbow / Knärör / Kulmakappale / Vinkelstykke / Kneledd / Torupölv / Угловой патрубков	63476	63476
1	Valve (AAV) / Ventil (AAV) / Ventil (AAV) / Ventil (AAV) / Klapp (AAV) / Антиасфиксийный клапан		
2	Vent / Ventilöppning / Ilma-aukko / Lufthul / Ventileringsåpning / Öhuava / Вентиляционное отверстие		
3	Side buttons / Sidoknappar / Sivupainikkeet / Sideknapper / Sideknapper / Nupud / Боковые кнопки		
4	Swivel / Svängbar koppling / Pyörivä liitin / Drejestuds / Svivel / Pöörel / Поворотный соединитель		
B	Frame / Maskram / Runko / Ramme / Ramme / Raam / Каркас	63465	63466
C	Cushion / Mjukdel / Pehmike / Pude / Pute / Pehmendus / Уплотнитель	63467 (S) 63468 (M) 63469 (L)	63467 (S) 63468 (M) 63469 (L)
D	Headgear / Huvudband / Päremmit / Hovedbånd / Hodestopper / Pearihm / Головной фиксатор	63470 (S) 63471 (Std) 63472 (L)	63473
5	Magnetic clips (2 pack) / Magnetclips (2 Stück) / Clips magnétiques (paquet de 2) / Fermagli magnetici (2 confezioni) / Magnetische klemmen (2 stuks) / عبوتان مشبكان مغنطيسيان	63475	63475

	AirFit F20	AirFit F20 for Her
6	Lower headgear straps / Nedre huvudbandsremmar / Pääremmien alahihnät / Nederste hovedbåndstroppe / Nedre hodestroppe / Pearihma alumised rihmad / Нижние ремешки головного фиксатора	
7	Upper headgear straps / Övre huvudbandsremmar / Pääremmien yläihnät / Øverste hovedbåndstroppe / Øvre hodestroppe / Pearihma ülemised rihmad / Верхние ремешки головного фиксатора	
A+B+C		
Frame system / Maskramssystem / Maskin koko runko / Rammesystem / Rammesystem / Raami komplekt / Система каркаса	63460 (S) 63461 (M) 63462 (L)	63463 (S) 63464 (M)
A+B+C+D		
Complete system / Komplett system / Maski täydellisenä / Komplet maske / Fullstendig system / Maski komplekt / Полная система	63410 (S) 63411 (M) 63412 (L)	63413 (S) 63414 (M)

S: Small / Small / Pieni / Small / Small / Väike / Маленький

M: Medium / Medium / Keskikokoinen / Medium / Medium / Keskmine /
Средний


L: Large / Large / Suuri / Large / Large / Suur / Большой

Std: Standard / Standard / Vakio / Standard / Standard / Standard /
Стандартный



ResMed

AirFit™ F20

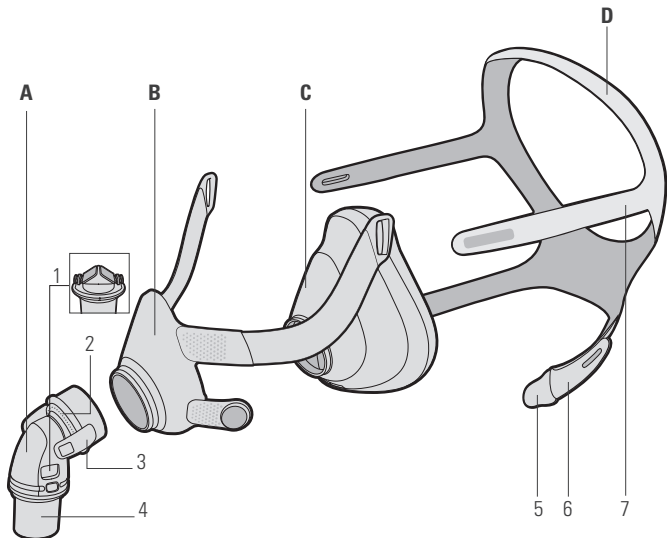

ResMed Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
Australia

Distributed by

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego
CA 92123 USA **EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park
Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. AirFit, AirSense and AirCurve are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip. © 2016 ResMed Ltd. 638037/2 2016-09

CE
0123

ResMed.com



638037